



MANICO KEELER TASCABILE

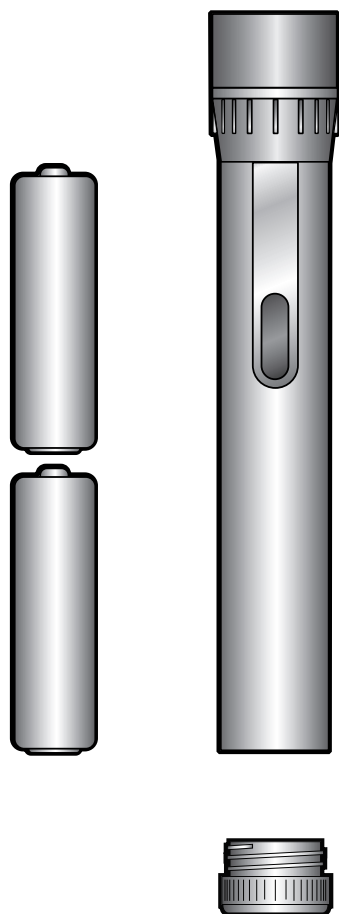


LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI

 **Keeler**

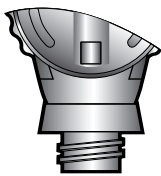


Connessione della testa dello strumento al manico

La connessione della testa dello strumento al manico avviene tramite una vite filettata. Connettere come indicato e ruotare in senso orario. Assicurarsi che la connessione fra la testa e il manico sia positiva.

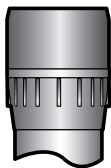

Compatibilità

Gli Oftalmoscopi Specialist, Professional, Standard e Practitioner Keeler e i Retinoscopi Keeler sono compatibili con i manici Keeler Vista 2.8v e 3.6v.

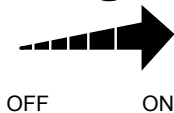

Controllo illuminazione on/off

Per accendere lo strumento ruotare il controllo illuminazione a destra come indicato. Per spegnere lo strumento ruotare il controllo a sinistra come indicato.

Inserimento/Sostituzione batterie.

Svitare il coperchio del comparto batterie, inserire le batterie e richiudere nel modo indicato.

Utilizzare le batterie a secco qui sotto indicate:

Manico Keeler Tascabile - batterie a secco 2 x 1.5v AA - Duracell MN 1500 o equivalente.

Istruzioni per la pulizia

Per lo strumento, eseguire unicamente una pulizia manuale, come qui sotto descritta, senza immergere l'unità in alcun liquido:

1. Detergere la superficie esterna con un panno pulito ed assorbente, che non lasci peli, inumidito con una soluzione di acqua/detergente (2% di detergente per volume d'acqua) oppure una soluzione di acqua e alcol isopropilico (70% IPA per volume d'acqua).
2. Assicurarsi che un eccesso di soluzione non penetri nello strumento. Fare attenzione che il panno non sia troppo bagnato.
3. Le superfici devono essere asciugate attentamente usando un panno pulito che non lasci peli.
4. Non disperdere la soluzione nell'ambiente dopo l'uso, ma eliminarla in modo sicuro.

Garanzia e manutenzione

Il prodotto non contiene parti sulle quali l'utente può effettuare la manutenzione – tutte le operazioni di manutenzione preventiva e servizio devono essere eseguite unicamente da rappresentanti autorizzati Keeler.

Il Vostro Manico Keeler è garantito per 3 anni e verrà sostituito o riparato gratuitamente, soggetto alle seguenti condizioni:

1. Qualsiasi guasto deve essere un guasto di fabbricazione.
2. Qualsiasi richiesta di sostituzione/riparazione deve essere corredata dalla ricevuta/scontrino di acquisto.

PRODOTTO NEL REGNO UNITO DA:

Keeler Limited

Clewer Hill Road

Windsor

Berkshire SL4 4AA

Inghilterra

Tel: +44 (0)1753 857177

Fax: +44 (0)1753 827145

NUMERO VERDE: 0800 521 251

DISTRIBUITO DA:

Keeler Instruments Inc

456 Parkway

Broomall

PA 19008, USA

Numero verde: 1 800 523 5620

Tel: 610 353 4350

Fax: 610 353 7814

"Il marchio CE indica che
questo prodotto è stato
testato e risulta conforme
alle norme definite nella
direttiva 93/42/EEC sui
dispositivi medicali"



— A —
HALMA GROUP
C O M P A N Y



Distributore